



Date Opened: _____
 Discard opened solution by: _____

REF ML02-0108

Rapicide™

High-Level Disinfectant & Sterilant

Utiliser pour le retraitement des endoscopes flexibles en fibres optique et vidéo dans les appareils de retraitement automatique vendus légalement uniquement. For use in reprocessing flexible fiber optic and video endoscopes in legally marketed automated reprocessors only.

INDICATIONS D'UTILISATION : L'utilisation de ce produit contrairement à son étiquetage constitue une violation de la Législation Fédérale Américaine. Lire les Indications D'utilisation pour de plus amples informations. Pour les informations sur le Nettoyage / la Décontamination, la Stérilisation, la Désinfection de haut niveau et la période de réutilisation, lire les Indications D'utilisation.

DÉCLARATIONS DE MISES EN GARDE :


DANGERS POUR LES HUMAINS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES.

Le contact direct avec des tissus est corrosif, causant ainsi des problèmes de vue et des brûlures de la peau. Evitez tout contact avec les yeux, la peau ou les habits. Eviter de respirer les inhalations. Evitez de contaminer les aliments. Utilisez des lunettes protectrices et des gants en Nitrile pendant la manipulation ou le transvasement.

DECLARATIONS SUR LE TRAITEMENT PRATIQUE : En cas de contact, rincez abondamment et immédiatement les yeux ou la peau avec de l'eau pendant au moins quinze (15) minutes. Consultez le personnel médical en cas de contact avec les yeux. Nocif en cas d'ingurgitation. Buvez de grandes quantités d'eau et appelez un médecin immédiatement. **NOTE AU MÉDECIN :** Une destruction de la musqueuse pourrait déconseiller un lavage gastrique.

APTITUDE DE L'UTILISATEUR : L'utilisateur doit avoir une formation adéquate en matière de décontamination et de désinfection ou de stérilisation des instruments médicaux ainsi que dans la manipulation des substances toxiques telles que les germicides chimiques liquides.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION : A conserver sous une température contrôlée 15°C - 25°C (59°F-77°F) Après l'ouverture d'un récipient, son contenu doit être immédiatement utilisé tandis que le reste inutilisé doit être mis au rebut. Débarassez-vous du reste de la solution conformément aux réglementations locales, provinciales ou fédérales. Ne pas réutilisez le récipient vide. Rincez le récipient trois fois avec de l'eau et le disposer dans un incinérateur ou dans une décharge approuvée pour les récipients de pesticides. Pour des informations supplémentaires sur la sécurité et l'efficacité de RAPICIDE™ Désinfectant de haut niveau et stérilant, appelez le numéro 1-800-328-3340.

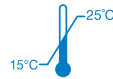

Voir la notice pour les plus amples renseignements sur le mode d'emploi et les précautions supplémentaires.
 Read package insert for complete usage instructions and additional cautionary statements.

- PRÊT À UTILISER • AUCUNE ACTIVATION REQUISE
- DURÉE MAXIMALE DE LA VIE D'UTILISATION: 28 JOURS
- READY TO USE • NO ACTIVATION REQUIRED
- 28-DAY MAXIMUM USE LIFE

RAPICIDE™ is a trademark of Medivators Inc.



Manufactured in the USA by:

Medivators Inc.
 14605 28th Avenue North
 Minneapolis, MN 55447 USA
 Toll Free: +1.800.444.4729

www.medivators.com

4x1 Gallon bottles per case
 © 2019 Medivators Inc.

DIRECTIONS FOR USE: It is a violation of Federal (USA) Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Read the Direction for Use for more detailed information. For Cleaning / Decontamination, Sterilization, High Level Disinfection, and Reuse period information read the Directions for Use.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:


HAZARD TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

Direct contact is corrosive to exposed tissue, causing eye and skin damage. Do not get in eyes, on skin or clothing, and avoid breathing the fumes. Avoid contamination of food. Wear protective eye covers and Nitrile gloves when handling or pouring.

STATEMENT OF PRACTICAL TREATMENT: In case of contact, immediately flush eyes or skin with copious amounts of water for at least fifteen (15) minutes. Get medical attention for eye contact. Harmful if swallowed. Drink large quantities of water and call a physician immediately. **NOTE TO PHYSICIAN:** Probable mucosal damage may contraindicate gastric lavage.

USER PROFICIENCY: The user should be adequately trained in the decontamination and disinfection or sterilization of medical devices and handling of toxic substances such as liquid chemical germicides.

STORAGE AND DISPOSAL: Store at controlled temperature 15°C-25°C (59°F-77°F). Once opened, the contents of container should be used within 28 days. Discard residual solution according to local, provincial, or federal regulations. Do not reuse empty container. Triple rinse with water and dispose in an incinerator or landfill approved for pesticide containers. For additional information regarding the safety and effectiveness of RAPICIDE™ High-Level Disinfectant and Sterilant call 1-800-328-3340.

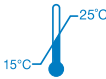

LOT : _____
 MFD : _____
 EXP : _____

Distributed in Canada by:
 Cantel (Canada) Inc.
 6-88B Beaver Creek Rd E
 Richmond Hill, ON L4B 4W2
 Phone: 844.348.5636
 Fax: 844.348.5637

67198-254 Rev P

